

KARA LASER
Beauty and Medical Equipments

KL

گروه مهندسين پزشکی

کارا لیزر



KARA

گروه مهندسين پزشکی کارا ليزر ایرانیان به عنوان یکی از واردکنندگان برتر دستگاههای زیبایی پزشکی در ایران، با افتخار خدمات خود را در صنعت تجهیزات زیبایی ارائه می‌دهد. ما به عنوان تیمی پیشرو در زمینه واردات و فروش دستگاههای با کیفیت بالا و قیمت مناسب، در تامین نیازهای زیبایی و بهبود پوست و بدن افراد، تعهد مطلق خود را به ارمغان می‌آوریم. تیم ما از متخصصان و مهندسين مجرب تشکیل شده است و عمده ترین سیاست ما انتخاب دستگاههایی است که علاوه بر کیفیت بالا، در طراحی و ساخت آنها دانش روز دنیا و استانداردها و تاییدیه های جهانی رعایت شده باشند. هدف ما این است که با ارائه تکنولوژی های پیشرفته و نوآورانه، به پزشکان و متخصصان زیبایی ابزارهایی ارائه دهیم که به آنها کمک کند تا به بهترین نتایج در درمان های زیبایی برسند.

مشتریان ما برایمان ارزشمند هستند و ارتباط نزدیک با آنها را بسیار مهم می‌دانیم. همکاران فروش ما با برخورد حرفه‌ای و دانش فنی عالی شما را راهنمایی می‌کنند و به سوالات و نیازهای شما پاسخ می‌دهند. ما از تجربه و بازخوردهای شما مشتریان گرامی استفاده می‌کنیم تا خدمات و محصولات خود را بهبود دهیم و همواره سطح رضایت شما را ارتقا دهیم. از اعتماد شما به گروه مهندسين پزشکی کارا ليزر ایرانیان سپاسگزاریم و به شما قول می‌دهیم که همواره در تلاش خواهیم بود تا برترین دستگاههای زیبایی پزشکی را با قیمت مناسب و با کیفیت عالی به شما گرامیان ارائه دهیم.



لیزر موهای زائد کندلا سری جنتل پرو

دستگاههای لیزر موی کندلا سری جنتل پرو جزو جدیدترین دستگاههای موجود در بازار با هدف حذف موهای زائد هستند که با بهره گیری از تکنولوژی بسیار پیشرفته لیزر موی الکس و آن دی یگ توانسته اند سرعت و دقت بالاتری نسبت به سایر دستگاههای لیزر موی تجاری داشته باشند.

LASER TYPE	ND:YAG	ALEXANDRITE
Wavelength	1064 nm	755 nm
Repetition	Up to 10 Hz	Up to 10 Hz
Max Delivered Energy	90 joules (J)	68 joules (J)
Pulse Duration	0.250-100 ms	
Spot Sizes	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm	
Specialty Delivery System	Small - 1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 3 x 10 mm	
Option Spot Sizes	Large - 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm	
Pulse Control	Finger switch, foot switch	
Electrical	200-240 VAC, 50/60 Hz, 30A, 4600 VA single phase	

لیزر موی کندلا الکساندرایت با تشعشع نور قرمز با انرژی بالا از طریق کریستال الکساندرایت کار می کند. طول طیف نوری تعیین می کند نور تا چه میزان در پوست نفوذ کند. در صورتیکه لیزر موی کندلا روی حالت Q-switching تنظیم شود، طیف نور با انرژی بسیار بالا و پالس های کوتاه ایجاد می کند که برای حذف تئوها کاملاً مناسب است.

علاوه بر حذف موهای زائد، لیزر کندلا الکس Gentle pro در موارد زیر نیز کاربرد دارد:

- برداشتن خال
- درمان واریس
- جای بخیه و سزارین
- برداشتن تنو

لیزر کندلا الکس توسط ملانین در پوست و فولیکول های مو جذب می شود. این لیزر نفوذ بیشتر و جذب ملانین کمتری دارد. به همین علت می توان آن را روی نواحی وسیعی از پوست با بازدهی بسیار بالا به کار برد. این دستگاه حتی برای برداشتن خالها، میک آپ های دائمی و تئوها نیز کارایی قابل قبولی دارد.





SOPRANO TITANIUM 2023

لیزر موهای زائد سوپرانو تیتانیوم
۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ وات وارداتی گرید A

سنگاه لیزر موهای زائد سوپرانو تیتانیوم در حال حاضر پیشرفته ترین و موثرترین دستگاه رفع موهای زائد تماسی موجود در بازار است. تنظیم مناسب طول موج لیزر و عرض پالس، لیزر می تواند به لایه زیرین پوست نفوذ کرده و سپس به فولیکول مو برسد. سپس انرژی نور جذب شده و به انرژی حرارتی تبدیل می شود که می تواند فولیکول مو را از بین ببرد. بنابراین لیزر باعث می شود موها توانایی خود را برای بازسازی از دست بدهند در حالی که بافت اطراف را از بین نمی برد. بنابراین دستگاه لیزر موهای زائد سوپرانو تیتانیوم یک فناوری بدون درد است که می تواند موهای مختلف بدن را با خیال راحت، سریع و برای مدت طولانی از بین ببرد.



منبع تغذیه

منبع تغذیه برق
مینول تایوان



پمپ آب ایتالیایی

جریان آب بیشتر، خنک کنندگی
بهتر و عمر بیشتر دستگاه



سیستم خنک کننده

۱۵۰۰ وات توان بالا
برای ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار مستمر



لیزر بار ماکروچنل

ساخت کوهنرت آمریکا

Product name	Soprano Titanium Hair Removal Laser
Laser Type	Diode Laser
Wavelength	755/808/940/1064nm
Laser Bar Power	1200/1600W
Energy Density	1-300J/cm2
Screen	15.6 inch 4K big touch android screen
Pulse Width	1-300ms
Frequency	1-10Hz Adjustable
Spot size Handle	15*35 mm
Cooling System	Double TEC cooling system+air+water circulation/Compres
Guarantee	2 Years

Machine Colour

Machine color customization selection

Frosted Black



Bright Black



Silver Gray



White



Golden



GOLDEN MAX PRO LASER

لیزر موهای زائد گلدن مکس پرو ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ وات وارداتی گرید A

سنگاه لیزر موهای زائد گلدن مکس پرو یکی از پیشرفته ترین و موثرترین دستگاه رفع موهای زائد تماسی موجود در بازار است. تنظیم مناسب طول موج لیزر و عرض پالس، لیزر می تواند به لایه زیرین پوست نفوذ کرده و سپس به فولیکول مو برسد. سپس انرژی نور جذب شده و به انرژی حرارتی تبدیل می شود که می تواند فولیکول مو را از بین ببرد. بنابراین لیزر باعث می شود موها توانایی خود را برای بازسازی از دست بدهند در حالی که بافت اطراف را از بین نمی برد. بنابراین دستگاه لیزر موهای زائد گلدن مکس پرو یک فناوری بدون درد است که می تواند موهای مختلف بدن را با خیال راحت، سریع و برای مدت طولانی از بین ببرد.



منبع تغذیه

منبع تغذیه برق
مینول تایوان




پمپ آب ایتالیایی

جریان آب بیشتر، خنک کنندگی
بهتر و عمر بیشتر دستگاه



سیستم خنک کننده

۱۵۰۰ وات توان بالا
برای ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار مستمر

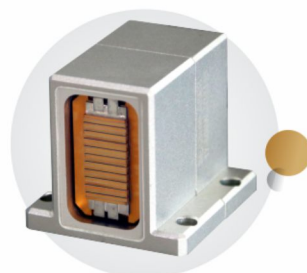

لیزر بار ماکروچنل

ساخت جنوپتیک آلمان

Laser Type	1200/1600 W Diode Laser
language	Different language can built in the system
Display	15.4 inch color touch LCD screen
Spot Size	12x20 mm2 12x30 mm2
Pulse Width	10-400mns adjustable
Energy	10-120 J/cm2
Frequency	1-20Hz (Continuous mode)
Cooling	water + air + semiconductor
Temperture of probe	0 4C
Hand piece Cooling System	Sapphire TEC cooling +water cooling + real time monitoring
Water System Cooling	USA high power condenser module fan cooling + real time monitoring
Water System Protection	Italian water pump, water flow, water level, water temperature etc.
Continuous Operation Time	24 hours
Peak Power	2000 W
Shots Time	40 million shots
Voltage	AC220V+22V, 60Hz, 10A

CO2 FRACTIONAL FOTONA

لیزر موهای زائد CO2 فرکشنال فتونا

فناوری لیزر CO2 فرکشنال از میکروپرتوهای انرژی لیزر برای نفوذ و تجزیه بافت پوست استفاده می کند، پرتو لیزر را به داخل درم هدف قرار می دهد و زخم های کوچکی را بدون اینکه به بافت قسمت های اطراف آسیب برساند در سراسر آن ناحیه ایجاد می کند. بدن به طور طبیعی بهبود می یابد و در طول این فرایند بافت جدید و سالمی برای جایگزینی مناطق آسیب دیده که تحت در مان قرار گرفته اند ایجاد می کند.



دراپور لیزر RF تیوب کوهرنت آمریکا



بازویی لیزر
ساخت کره جنوبی




Wavelength:	10600nm
Output power:	40w
Spot size:	0.02~0.05mm2
Aiming beam:	Red semiconductor laser (635nm, less than 5mw)
Beam transport device:	Articulated arm with 7-joint and balance weight
Working mode:	Continuous operation
Output mode:	Continuous, single pulse, interval pulse and super Pulse
Scan Scope:	Max 20mmx20mm
Scan graphics:	Circle, triangle, square, rectangle, hexagon, ellipse, line
Scanning Mode:	Random , Normal and Midsplit scan
Scanning speed:	More than 10m/s Energy: 1- 40W
Distance:	0.1-2.6mm
Cooling system:	air circulation
Power:	220V/11V

کاربردهای لیزر CO2 فرکشنال:

- کاهش خطوط ریز و چین و چروک
- بهبود بافت پوست
- سفت کننده پوست
- کاهش اندازه منافذ باز پوست
- کاهش رنگدانه ناخواسته پوست
- کاهش لکه های پیش سرطانی خورشید (کراتوز اکتینیک)
- بهبود اسکارهای پوستی (مانند اسکار آکنه و استرچ مارک و ...)

دستگاه پیکو استار پرو، بهترین لیزر حذف تتو است، نام پیکو در این دستگاه نشان دهنده فناوری لیزر پیکوسکند است. لیزر پیکو استار پرو با استفاده از پالس های بسیار کوتاه (پیکو ثانیه) با فشار زیادی به ملانین برخورد می کند و ملانین رنگدانه به ذرات ریز گرد و غبار تبدیل می شود. و این ذرات ریز بسیار کوچک به راحتی توسط بدن جذب و دفع می شوند. پیکو لیزر یک روش درمان سریع و آسان و غیرتهاجمی پوست است.

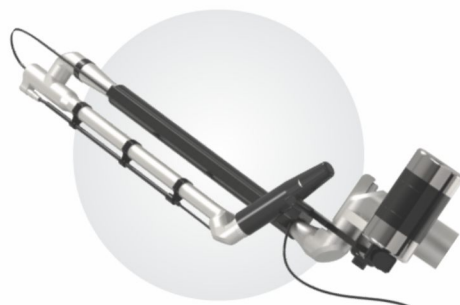

بازویی لیزر
ساخت کره جنوبی

Laser Type	Co2 Laser
Type	Picosecond removal Laser
Certification	CE, ISO 9001, RoHS
Guarantee	1 year
Wavelength	1064 nm probe, 532nm probe, 755 nm
Spot Size	2-10 mm adjustable
Frequency	1-10 Hz
Cooling System	Built-in closed water circulation system
Laser Power	5000 W
Single max output power	1064 mm(100-1200 mj), 532mm(50-600mj), 755 (100-1200mj)
Pulse width	300-500ps, 500-550ps, 500-700ps
Energy	1-2000mj

کاربردهای لیزر پیکو استار پرو

• حذف رنگدانه • درمان منافذ باز پوست • سفید کننده • جوان سازی پوست • درمان پیگمنته پوست • پاک کننده تتو

تفاوت بین پیکو سکند و کیو سوئیچ

لیزرهای نانو ثانیه (لیزرهای کیوسوئیچ) با مدت زمان پالس بر حسب نانو ثانیه کار می کنند. لیزرهای پیکوثانیه با مدت زمان پالس که بر حسب پیکو ثانیه شمارش می شوند کار می کنند. پیکو ثانیه ۳ برابر کمتر از نانو ثانیه طول می کشد. زمان کوتاه تر قرار گرفتن در معرض لیزر باعث نتایج درمانی موثرتری می شود. علاوه بر این، درمان هایی که با لیزر پیکوثانیه انجام می شود نسبت به درمان هایی که با لیزر کیو سوئیچ انجام می شود به دوره نقاهت کوتاه تری نیاز دارند. برداشتن تتو با لیزر پیکو ثانیه به دلیل زمان گرم شدن کمتر پوست، درد کمتری دارد.

لیزر کیوسوئیچ کیوتک با بهره گیری از تکنولوژی لیزر نانو ثانیه با تفکیک ملانین طبیعی پوست از ملانین رنگدانه خارجی، آنها را هدف قرارداده و به ذرات ریز بصورت طبیعی از بدن دفع می شود.


- دارای تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا FDA
- پاک کردن خالکوبی و آرایش دائمی تمامی رنگ ها
- درمان ضایعات رنگدانه ای پوست
- جوان سازی پوست با لیزر کربن تراپی

Power	1500/2000 W
Energy	300-1000 mj
Output Frequency	1 - 6 Hz
Screen Size	8 Inch
Wavelength	532 nm, 1064 nm, 1320 nm
Cooling System	Air + Water Cooling
Voltage	AC 220V+10% 10A 50Hz

راد لیزر روسی: راد لیزر اصلی ترین قطعه در هندپیس است و کیفیت آن بطور مستقیم بر قدرت انرژی لیزر تاثیر می گذارد و هرچه قطر راد لیزر بیشتر باشد، انرژی خروجی بیشتر است. راد لیزر دستگاه کیوتک وارداتی از روسیه می باشد و قطر ۷ میلی متری دارد که انرژی بالاتر و طول عمر بیشتری دارد.

رفلکتور نقره: رفلکتور دستگاه کیوتک از جنس نقره ساخته شده که به راحتی اکسید نمی شود، انرژی بالاتر و عمر طولانی تری دارد.

لامپ زنون انگلیسی: لامپ دستگاه کیوتک با قطر ۷ میلی متری ساخت انگلیس است که انرژی بالاتر و طول عمر بیشتری دارد که به راحتی تا ۵ میلیون شات کار می کند.

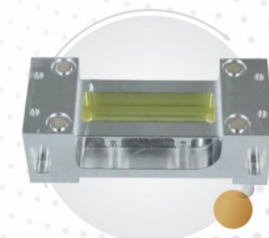

هایفو (امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا) یک فناوری جراحی است که لیفت ابرو، لیفت غبغب، کاهش چین و چروک پیشانی و اطراف چشم و سفت کردن و جوانسازی کلی پوست را انجام می دهد. انرژی صوتی بسیار متمرکز، مناطق انعقاد حرارتی را در عمق های مختلف ایجاد می کند. پاسخ ترمیمی بافت منجر به تشکیلات جدید می شود و در نتیجه سفت شدن طولانی پوست را فراهم می کند، هیچ نقاهت و دوره استراحتی بعد از جلسه هایفوتراپی که یک روش غیرتهاجمی است وجود ندارد. هایفو به سرعت به یکی از درمان های غیر جراحی لیفت صورت تبدیل شده است که تنها به یک جلسه نیاز دارد و نتایج آن می تواند تا ۱۸ ماه دوام داشته باشد. هدف اصلی هایفوتراپی کاهش سرعت پیری می باشد.



Energy Type	MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound)
Power	0.1 - 0.3J
Spacing	1 - 2mm
Length	5.0 - 25mm
Rating	220-240v, 50/60Hz

ناحیه هایی که می توان هایفوتراپی کرد:

- ابرو، چین و چروک دور چشم، چین و چروک اطراف دهان
- گونه، پیشانی، چانه، چین و چروک گردن، زاویه سازی فک
- شکم، داخل ران، بیرون ران، زیر بازو، سینه
- لاغری بدن و کاهش چربی و فرم دهی
- سفت کردن واژن



۳۰ هزار شات

کارتیج های بدن ۶، ۹، ۱۳ میلی متری انرژی اولتراسوند وارد بافت زیر جلدی می شود و سلول های چربی را از بین می برد و به طور طبیعی آنها را از بدن خارج می کند.

کارتیج های صورت ۱/۵، ۲، ۳، ۴/۵ میلی متری

(انرژی اولتراسوند را به صورت یکنواخت به لایه های سیستم عضلانی آپونورتیک سطحی (SMAS) صورت می رساند تا بازسازی کلاژن را تحریک کند)

۲۰ هزار شات

هایفو (امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا) یک فناوری جراحی است که لیفت ابرو، لیفت غبغب، کاهش چین و چروک پیشانی و اطراف چشم و سفت کردن و جوانسازی کلی پوست را انجام می دهد. انرژی صوتی بسیار متمرکز، مناطق انعقاد حرارتی را در عمق های مختلف ایجاد می کند. پاسخ ترمیمی بافت منجر به تشکیل کلاژن جدید می شود و در نتیجه سفت شدن طولانی پوست را فراهم می کند، هیچ نقاهت و دوره استراحتی بعد از جلسه هایفوتراپی که یک روش غیرتهاجمی است وجود ندارد. هایفو به سرعت به یکی از درمان های غیر جراحی لیفت صورت تبدیل شده است که تنها به یک جلسه نیاز دارد و نتایج آن می تواند تا ۱۸ ماه دوام داشته باشد. هدف اصلی هایفوتراپی کاهش سرعت پیری می باشد.



Power Supply	AC 90V 240V
Power	150W
Frequency	700-1060 hpaeffe
Working Humidity	10-90%

ناحیه هایی که می توان هایفوتراپی کرد:

- ابرو، چین و چروک دور چشم، چین و چروک اطراف دهان
- گونه، پیشانی، چانه، چین و چروک گردن، زاویه سازی فک
- شکم، داخل ران، بیرون ران، زیر بازو، سینه
- لاغری بدن و کاهش چربی و فرم دهی
- سفت کردن واژن



T - 1.5 (5.5 MHZ)



T - 2.0 (5.5 MHZ)



T - 3.0 (5.5 MHZ)



T - 4.5 (5.5 MHZ)

Normal (Puncrate)

Normal (Puncrate)

Micro Pulse (Linear)

Micro Pulse (Linear)



T - 6.0 (2 MHZ)



T - 9.0 (2 MHZ)



T - 13 (2 MHZ)



T - 1.5 (5.5 MHZ)



T - 3.0 (5.5 MHZ)




T - 4.5 (4 MHZ)


دستگاه لاغری کرایو کوادرو ترکیبی از چهار فناوری اولتراسوند کویتیشن، رادیو فرکانسی، وکیوم خلاء کرایولیپولیز و لیزر مادون قرمز است. این دستگاه چند منظوره برای کاهش چربی، فرم دهی و لاغری بدن، سفت کردن و لیفت پوست کاربرد دارد.

Power Supply Mode	AC220V+10% 50Hz
Rated Power	1500W
Vacuum Idensity	0-80 Kpa
Frozen Head Temperature	-15°C to -10°C
Laser Power	100mw/pcs
Cavitation Frequency	40KHz
RF Frequency	5MHz
Cyro Quantity	5 Pcs
Cooling System	Semiconductor Cooling + Water Cooling + Air Cooling
Relative humidity	<80%

روش کرایولیپولیز با انجماد چربی در واقع تعداد سلول های چربی در نواحی تخت درمان را بین ۲۰% تا ۲۵% کاهش می دهد.

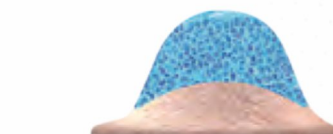

با کرایو ۳۶۰ درجه کرایو کوادرو ۱۰۰ درصد منطقه خنک کننده موثر: عملکرد خنک کننده در کل محیط هندپیس

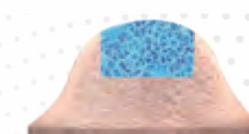

تکنولوژی قدیمی کرایو ۴۰ درصد منطقه خنک کننده موثر خنک کننده توسط دوید داخل هندپیس



هندپیس RF صورت
برای لیفت غبغب و صورت



هندپیس RF بدن
برای فرم دادن به بدن و سخت کردن پوست پس از کاهش چربی



هندپیس کویتیشن
برای شکستن چربی بازو، پا و پشت

مزایای کرایو کوادرو:

- **چندکاره:** ترکیب چهار فناوری کرایولیپولیز، کویتیشن، رادیو فرکانسی و لیپولیز در یک دستگاه
- **سیستم خنک کننده:** سیستم خنک کننده فوق العاده قوی با مخزن آب ۸ لیتری، رادیاتور مسی و فن های خنک کننده DC ، کارکرد مداوم ۱۲ ساعته دستگاه را تضمین می کند.
- **هوشمند:** سیستم عامل هوشمند با دو روش کنترل حالت اتوماتیک و حالت دستی
- **راحتی در درمان:** سه دقیقه حرارت دادن ابتدا باعث گردش خون بهتر در ناحیه تحت درمان می شود تا به بهترین نتایج درمانی و احساس راحتی دست یابید.



کرایو تک پرو ۳۶۰ درجه

روش کرایولیپولیز به طور ایمن خنک کننده دقیق و کنترل شده ای را ارائه می دهد تا به آرامی و به طور موثر سلول های چربی زیر پوست را هدف قرار دهد. سلول های چربی هدف متبلور می شوند (یخ زده)، سپس می میرند. با گذشت زمان بدن شما به طور طبیعی بافت های چربی را پردازش می کند و این سلول های مرده را از بین می برد و بدن شما را لاغرتر و زیباتر می کند.



Handle Number	4 Handles Available
Handle Screen	3.5 inch touch screen
Vacuum	0KPA-100KPA
Screen	10.4 inch
Cooling temperature	5 - -10°C
Cooling system	Wind Cooling + water cooling+ semiconductor cooling
Input Power	2500W
Fuse specification	Ø5×25 15A
Voltage	AC220V±10%,10A;50HZ

مزایای کرایو تک ۳۶۰ درجه

ارایی بالا دستگاه: طراحی کرایو ۳۶۰ درجه و چهار هندپیس طور همزمان کار می کنند، باعث صرفه جویی در هزینه ارکنان و صرفه جویی در زمان درمان می شود.

جامع بودن دستگاه: چهار هندپیس با اندازه های مختلف و ۱۰ پروب سری جداشونده امکاناتی را فراهم می کند که راحتی برای کل بدن استفاده می شود.

ایمنی دستگاه: چهار سنسور دما حرفه ای در هر هندپیس، ایمنی کنترل دما را تضمین می کند.

تاثیرگذاری دستگاه: سیستم خنک کننده فوق العاده قوی تضمین می کند که حداقل دمای درمان به ۱۵°C- کاهش می یابد.

چربی های ناخواسته بیشتری را هدف قرار دهید: هندپیس کرایولیپولیز ۳۰ درجه، ۱۰۰ درصد منطقه خنک شونده موثر ایجاد می کند و عملکرد خنک کننده ۳۶۰ درجه در کل هندپیس نتیجه درمان بسیار موثرتر می کند.

اوند پرو ترکیبی از چهار فناوری اولتراسوند کویتیشن، رادیوفرکانس (RF)، وکیوم و مادون قرمز است. این دستگاه چند منظوره برای لاغری بدن، سفت کردن پوست، لیفت صورت، ماساژ و آرامش است.

عملکردهای دستگاه اوند پرو:

کویتیشن اولتراسوند: کویتیشن از امواج فراصوت برای برهم زدن دیوارهای سلول های چربی استفاده می کند که باعث می شود سلول های چربی محتویات خود را به فضای سیال بدن نشأت دهند. سپس سیستم لنفاوی بدن این مواد را میگیرد (کاهش چربی) و شروع به گردش آن در بدن می کند که توسط کبد آنالیز می شود و با عرق، ادرار و مدفوع دفع و از بین می رود.

چند قطبی: فرکانس رادیویی چند قطبی باعث واکنش گرمازا در بافت می شود که پاسخ درمانی طبیعی بدن را تحریک می کند و باعث تشکیل کلاژن جدید و تولید الیاف الاستین جدید می شود که باعث لیفت و سفت شدن پوست می شود.
ماساژ وکیوم: پس از شکستن چربی زیر پوست، تجمع سلولیت را کاهش می دهد. این فرآیند به پوست کمک می کند و اسید چرب سمی را که در سیستم لنفاوی تجزیه می شود را تخلیه و دفع می کند.
لیزر مادون قرمز: لیزر مادون قرمز بطور مستقیم ناحیه مورد نظر را گرم می کند. برای رفع سلولیت استفاده می شود.

Power	800/1500 W
Cavitation Frequency	40 Khz
RF Frequency	1000 Khz
RF Power	320/600 W
Vacuum Indensity	0-80 Kpa
IR laser power	10/20 W
IR laser wavelength	940 nm




RF زیر چشم



RF صورت



RF بدن

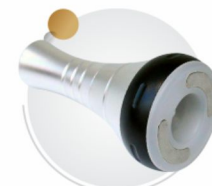

RF وکیوم



کویتیشن



لیزر لیپولیز

اندرمولوژی وی شیپ

وی شیپ پنج فناوری مختلف از جمله لیزر مادون قرمز (IR) ، رادیو فرکانسی دو قطبی (RF) ، غلطک ماساژ (اندرمولوژی) ، وکیوم و کویتیشن اولتراسوند را ترکیب می کند. ترکیب IR ، RF و وکیوم باعث گرم شدن عمیق سلول های چربی، بافت همبند اطراف آن و رشته های کلاژن پوستی زیرین می شود. این نوع گرمایش و وکیوم کارآمد باعث تحریک رشد کلاژن و الاستین جدید و بهتر می شود که منجر به کاهش موضعی شلی پوست، کاهش حجم بدن و بهبود کلی در ساختار و بافت پوست می شود. اندرمولوژی و کویتیشن نیز باعث افزایش فوری گردش خون و تخلیه لنفاوی می شود که هر دو جزء ضروری برای رفع سلولیت و ساختار پوست سالم هستند.

کاربردهای دستگاه وی شیپ

لاغری و فرم دهی: سلولیت را از بین ببرید، دور کمر را کوچک کنید، انحنای کامل بدن را شکل دهید
رفع چین و چرک: خطوط پای کلاغی را بردارید و پوست اطراف چشم را بهبود ببخشید
لیفت و سخت کردن پوست: سفت کردن پوست و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست
ماساژ آرامش بخش: تسریع متابولیسم، بهبود خون و تخلیه لنفاوی



Power of RF	800W
Frequency of RF	2Mhz
Infrared Laser Power	20W
Infrared Laser wavelength	940nm
Ultrasound Power	200W
Vacuum Indensity	10-90Kpa



هندیس
مادون قرمز
آر اف رولی وکیوم (کوچک)



هندیس
مادون قرمز
آر اف رولی وکیوم (بزرگ)



هندیس
کویتیشن وکیوم



هندیس
آر اف رولی
وکیوم صورت

دستگاه اسکالپینگ تک با استفاده از فناوری الکترومغناطیسی متمرکز با شدت بالا (HIFEM)، انقباضات ماهیچه ای فوق العاده ای ایجاد می کند که از طریق ورزش (با انقباضات ارادی) قابل دستیابی نیست. در طول انقباضات ارادی ماهیچه ای طبیعی، فیبرهای عضلانی بین هر محرک عصبی شل می شوند. اسکالپینگ تک تکانه هایی را با فرکانس بالایی تولید می کند که اجازه چنین مرحله آرامشی را نمی دهد، انقباضات فوق حداکثر باعث افزایش ترشح آدرنالین می شود که باعث واکنش شدید لیپولیز در سلول های چربی می شود. هنگامی که در معرض انقباضات فوق حداکثری قرار می گیرد، بافت عضلانی مجبور به سازگاری می شود و با بازسازی عمیق ساختار درونی خود پاسخ می دهد که منجر به عضله سازی و چربی سوزی می شود.

مزایای دستگاه اسکالپینگ تک

Frequency	1-150hz
Power	5000w
Idensity	7 Tesla
screen	12.4 inch tough screen
pulse width	310 +10%
cooling	Air Cooling
voltage	AC220V+10A 50Hz

عضله سازی و کاهش چربی: پس از اتمام دوره درمان، جریان مغناطیسی می تواند بطور موثر عضله را تا ۱۶ درصد افزایش دهد و همزمان چربی را تا ۱۹ درصد کاهش دهد.

یک اندام عالی ایجاد کنید: عضلات باسن را تمرین دهید تا باسن خوش فرمی ایجاد شود، عضلات مایل شکم را تمرین دهید تا خط شکم را شکل دهید.

بازیابی فرم اندام پس از زایمان: برای مادرانی که به دلیل جدا شدن رکتوس شکم بعد از زایمان، دور شکمشان افزایش یافته و بافت شکم شل شده است، کمک می کند تا اندام دخترانه را بازیابی کنند.

بدنی جوان بسازید: ورزش برای تقویت عضلات مرکزی مفید است عضلات مرکزی می تواند از ستون فقرات محافظت کند و وضعیت صحیح بدن را حفظ کند، توانایی ورزشی را بهبود بخشد و احتمال آسیب را کاهش دهد، حمایت ساختاری برای کل بدن ایجاد کند و بدنی جوان ایجاد کند.



KARA LASER

Beauty and Medical Equipments



KARA LASER

Beauty and Medical Equipments



KARA LASER
Beauty and Medical Equipments




بزرگراه سردار سلیمانی (رسالت)، خیابان کرمان شمالی

نیش خیابان صافی، پلاک ۱، ساختمان پزشکان مادر، طبقه ۴، واحد ۱۳

 www.karalaser.com/ir

 [karalasercom](https://www.instagram.com/karalasercom)

۰۲۱-۲۶ ۱۴ ۶۴ ۲۸ 

مدیرعامل ۰۹۱۲ ۱۹ ۷۷ ۴۴۵ 

مدیرفروش ۰۹۱۲ ۲۲ ۴۴ ۲۱۰ 